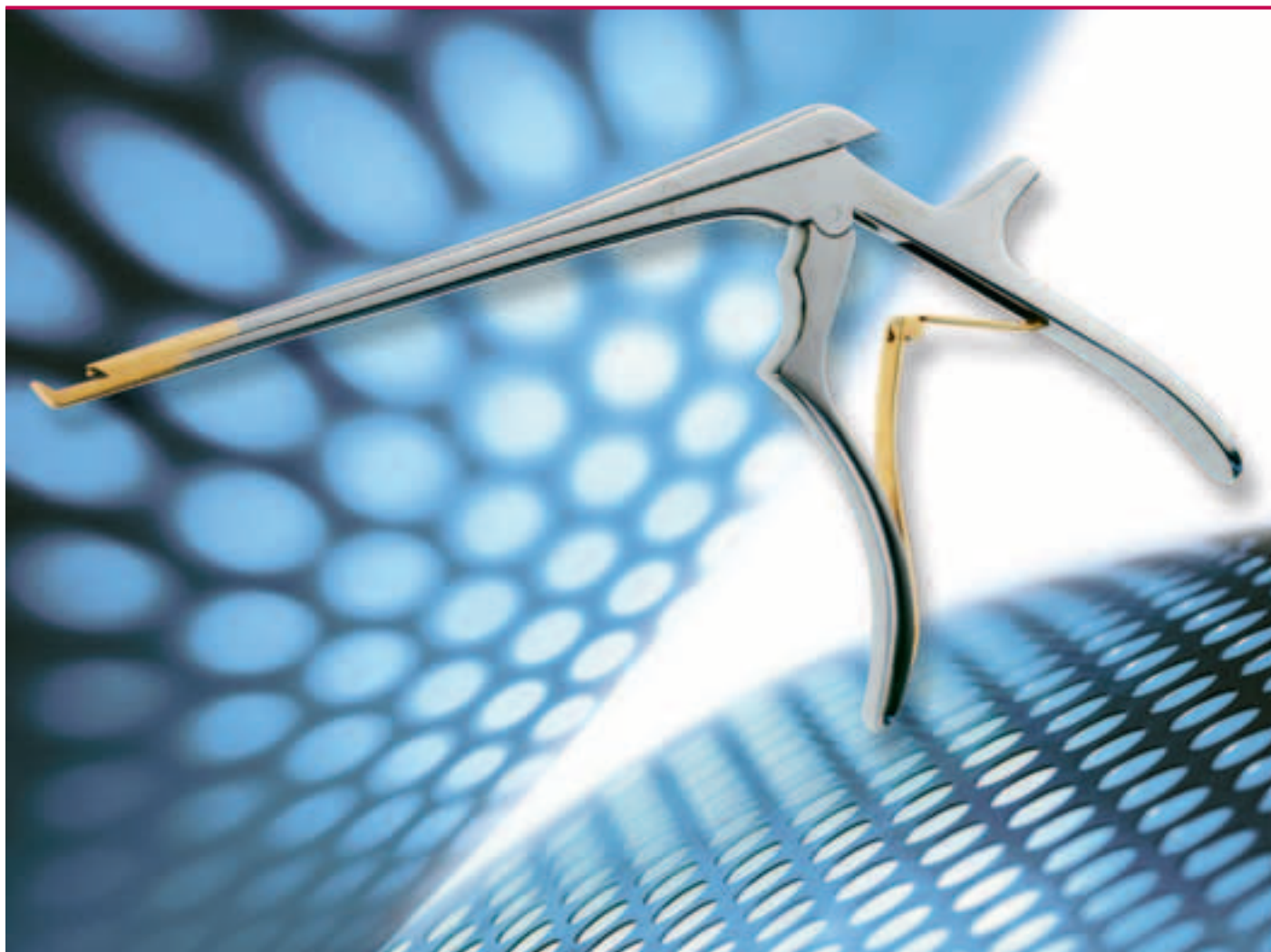


# Aesculap Neurosurgery

## Kerrison Rongeurs

Detachable Bone Punches  
Zerlegbare Knochenstanzen



Detachable in  
Zerlegbar in

1 - 2 - 3

steps  
Schritten

### Disassembly Zerlegen

Remove spring from  
outer part of handle.

Feder aus dem äußeren  
Griffteil aushängen.



Insert spring into outer  
part of handle.

Feder in das äußere Griff-  
teil einhängen.

Close handle completely  
and pull down the inner  
part of the handle.

Griff komplett schließen,  
und inneres Griffteil nach  
unten ziehen.



Press up inside part of  
handle and open handle.

Inneres Griffteil nach  
oben drücken und Griff  
öffnen.

Remove sliding part  
backwards.

Schiebeteil nach hinten  
abziehen.



Insert sliding part and  
push it forward.

Schiebeteil aufsetzen  
und nach vorne schieben.

Assembly  
Zusammensetzen





## The joy of simplicity

### **Intraoperatively**

Good cutting properties, long durability, easy removal of material.

### **Postoperatively**

Easy disassembly and assembly, efficient cleaning and sterilization.

With the detachable Kerrison bone punches, you bring convenience and reliability to your hospital. The ergonomic handle design guarantees easy handling and fatigue-free working. The bone punch can be disassembled easily and rapidly into two components without using any additional tools. Therefore cleaning and reprocessing is easier and faster.

## Aus Freude am Einfachen

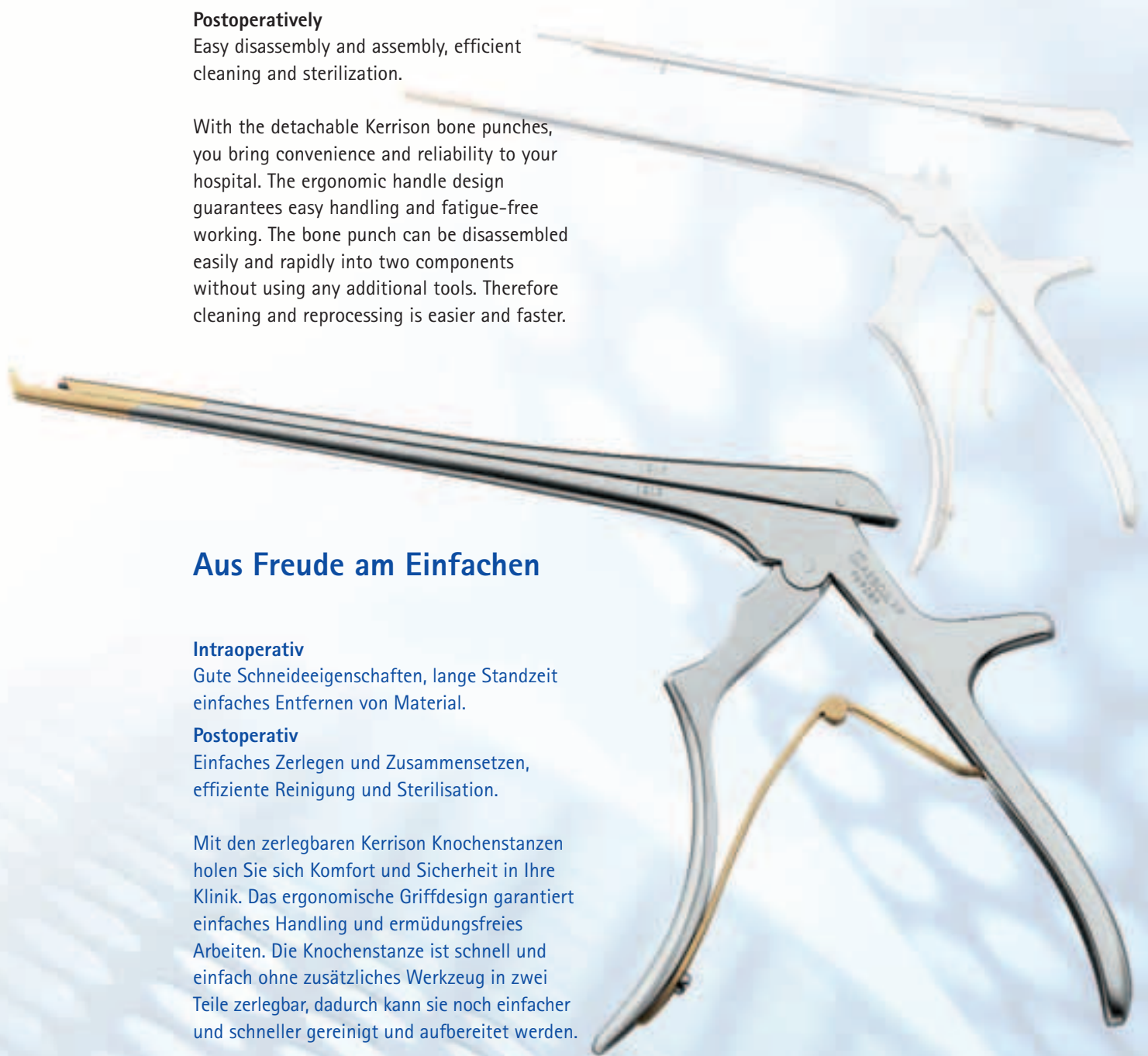
### **Intraoperativ**

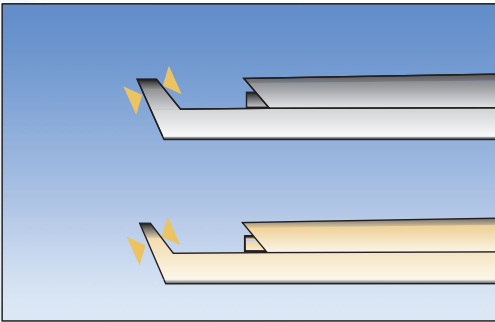
Gute Schneideigenschaften, lange Standzeit einfaches Entfernen von Material.

### **Postoperativ**

Einfaches Zerlegen und Zusammensetzen, effiziente Reinigung und Sterilisation.

Mit den zerlegbaren Kerrison Knochenstanzen holen Sie sich Komfort und Sicherheit in Ihrer Klinik. Das ergonomische Griffdesign garantiert einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. Die Knochenstanze ist schnell und einfach ohne zusätzliches Werkzeug in zwei Teile zerlegbar, dadurch kann sie noch einfacher und schneller gereinigt und aufbereitet werden.






- ▶ Kerrison bone punches with a thin footplate are designed for use on soft tissue or thin bone only. They are identified by a gold colored distal end.

Die Kerrison Knochenstanzen mit dünner Fußplatte sind nur für die Anwendung an weichem Gewebe bzw. dünnen Knochen bestimmt. Sie sind am distalen Ende durch einen Goldüberzug gekennzeichnet.




- ▶ The unique numerical code enables components to be properly matched for fast and easy reassembly.

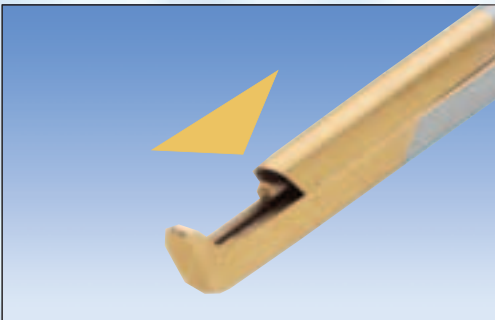Der Nummern-Code gewährleistet Sicherheit und einfache Zuordnung beim Zusammen-setzen der beiden zusammengehörigen Stan-zenteile.



- ▶ The material can be easily removed by the "ejector".

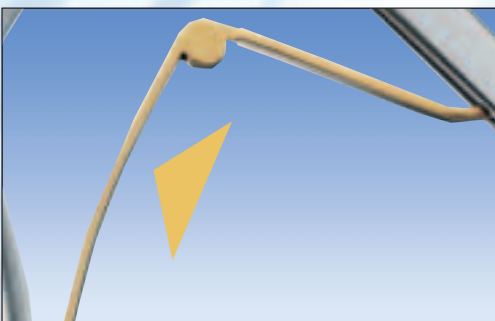Der „Auswerfer“ ermöglicht ein einfaches Entfernen von Material.




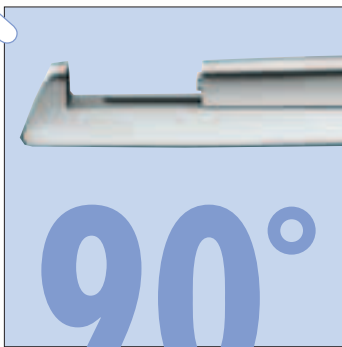- ▶ The gold colored spring stands for easy identification of **detachable** bone punches. Die **zerlegbaren** Stanzen sind durch eine goldene Feder gekennzeichnet.






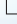



# Product Range
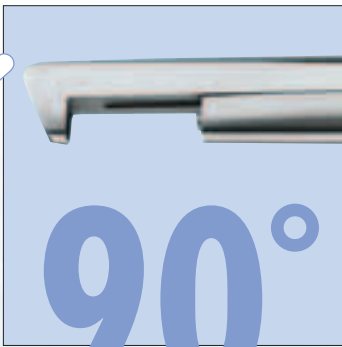
## Produktprogramm









Jaw position upwards  
Maulstellung oben

Art. No. Art.-Nr.	Length Länge	Width Breite	Ejector Auswerfer
FK948R	180 mm	1 mm 	-
FK949R	180 mm	2 mm 	-
FK950R	180 mm	3 mm 	✓
FK951R	180 mm	4 mm 	✓
FK952R	180 mm	5 mm 	✓
FK953R	180 mm	6 mm 	✓



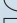Jaw position downwards  
Maulstellung unten

Art. No. Art.-Nr.	Length Länge	Width Breite	Ejector Auswerfer
FK954R	180 mm	1 mm 	-
FK955R	180 mm	2 mm 	-
FK956R	180 mm	3 mm 	✓
FK957R	180 mm	4 mm 	✓
FK958R	180 mm	5 mm 	✓
FK959R	180 mm	6 mm 	✓


# Product Range
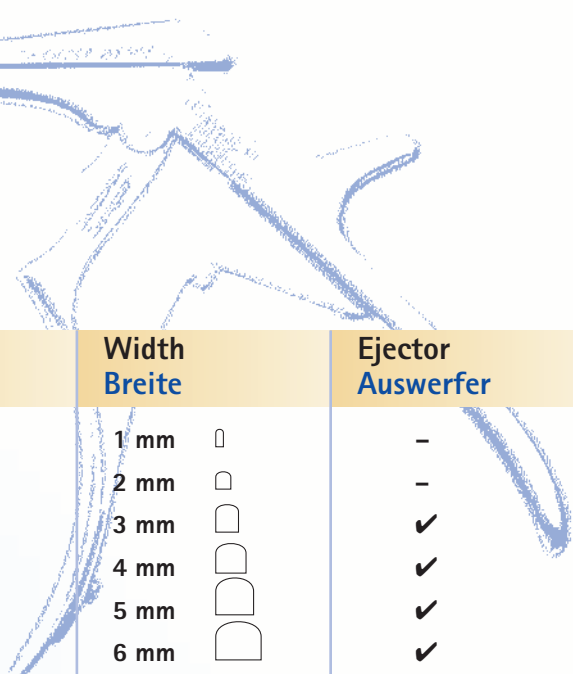
## Produktprogramm




**130°**

Jaw position upwards  
Maulstellung oben




	Art. No. Art.-Nr.	Length Länge	Width Breite	Ejector Auswerfer
	FK900R	180 mm	1 mm	-
	FK901R	180 mm	2 mm	-
	FK902R	180 mm	3 mm	✓
	FK903R	180 mm	4 mm	✓
	FK904R	180 mm	5 mm	✓
	FK905R	180 mm	6 mm	✓
<p>These bone punches have a thin foot plate and are identified by their gold colored distal end.</p> <p>Diese Stanzen haben eine dünne Fußplatte und sind deshalb am distalen Ende goldfarben markiert.</p>	FK906R	180 mm	1 mm	-
	FK907R	180 mm	2 mm	-
	FK908R	180 mm	3 mm	✓
	FK909R	180 mm	4 mm	✓
	FK910R	180 mm	5 mm	✓
	FK913R	200 mm	2 mm	-
	FK914R	200 mm	3 mm	✓
	FK915R	200 mm	4 mm	✓
	FK916R	200 mm	5 mm	✓
	FK917R	200 mm	6 mm	✓
<p>These bone punches have a thin foot plate and are identified by their gold colored distal end.</p> <p>Diese Stanzen haben eine dünne Fußplatte und sind deshalb am distalen Ende goldfarben markiert.</p>	FK961R	200 mm	1 mm	-
	FK962R	200 mm	2 mm	-
	FK963R	200 mm	3 mm	✓
	FK964R	200 mm	4 mm	✓
	FK965R	200 mm	5 mm	✓
	FK919R	230 mm	2 mm	-
	FK920R	230 mm	3 mm	✓
	FK921R	230 mm	4 mm	✓
	FK922R	230 mm	5 mm	✓
<p>These bone punches have a thin foot plate and are identified by their gold colored distal end.</p> <p>Diese Stanzen haben eine dünne Fußplatte und sind deshalb am distalen Ende goldfarben markiert.</p>	FK925R	230 mm	2 mm	-
	FK926R	230 mm	3 mm	✓
	FK927R	230 mm	4 mm	✓
	FK928R	230 mm	5 mm	✓

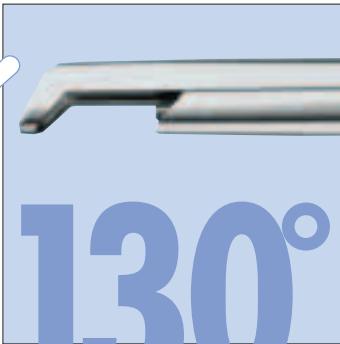

**130°**

Jaw position downwards

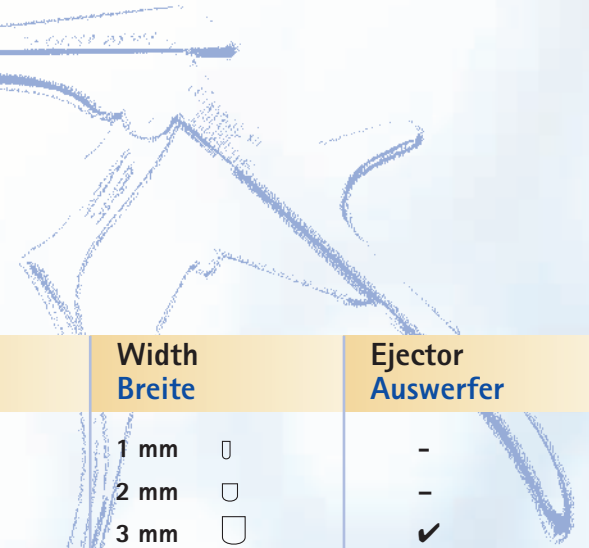Maulstellung unten



	Art. No. Art.-Nr.	Length Länge	Width Breite	Ejector Auswerfer
<p>These bone punches have a thin foot plate and are identified by their gold colored distal end.</p> <p>Diese Stanzen haben eine dünne Fußplatte und sind deshalb am distalen Ende goldfarben markiert.</p>	FK930R	180 mm	1 mm 	-
	FK931R	180 mm	2 mm 	-
	FK932R	180 mm	3 mm 	✓
	FK933R	180 mm	4 mm 	✓
	FK934R	180 mm	5 mm 	✓
	FK936R	180 mm	1 mm 	-
	FK937R	180 mm	2 mm 	-
	FK938R	180 mm	3 mm 	✓
	FK939R	180 mm	4 mm 	✓
	FK940R	180 mm	5 mm 	✓
	FK943R	230 mm	2 mm 	-
	FK944R	230 mm	3 mm 	✓
	FK945R	230 mm	4 mm 	✓
	FK946R	230 mm	5 mm 	✓

For more information please also ask for our brochures: C085 11 Kerrison Noir, C21802 Kerrison Bone Punches (not detachable).

Weitere Informationen finden Sie in den Prospekten: C085 11 Kerrison Noir, C21801 Kerrison Knochenstanzen (nicht zerlegbar).





# AESCULAP®

All it takes to operate.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**Aesculap AG & Co. KG**

Am Aesculap-Platz  
78532 Tuttlingen

Phone +49 7461 95-0

Fax +49 7461 95-2600

[www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be used for no other purposes than offering, buying and selling of our products. No part may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we retain the rights to recall our catalogues and pricelists and to take legal actions.