


Aesculap Endoscopic Technology

AdTec[®] needle holder

Suturing made simple

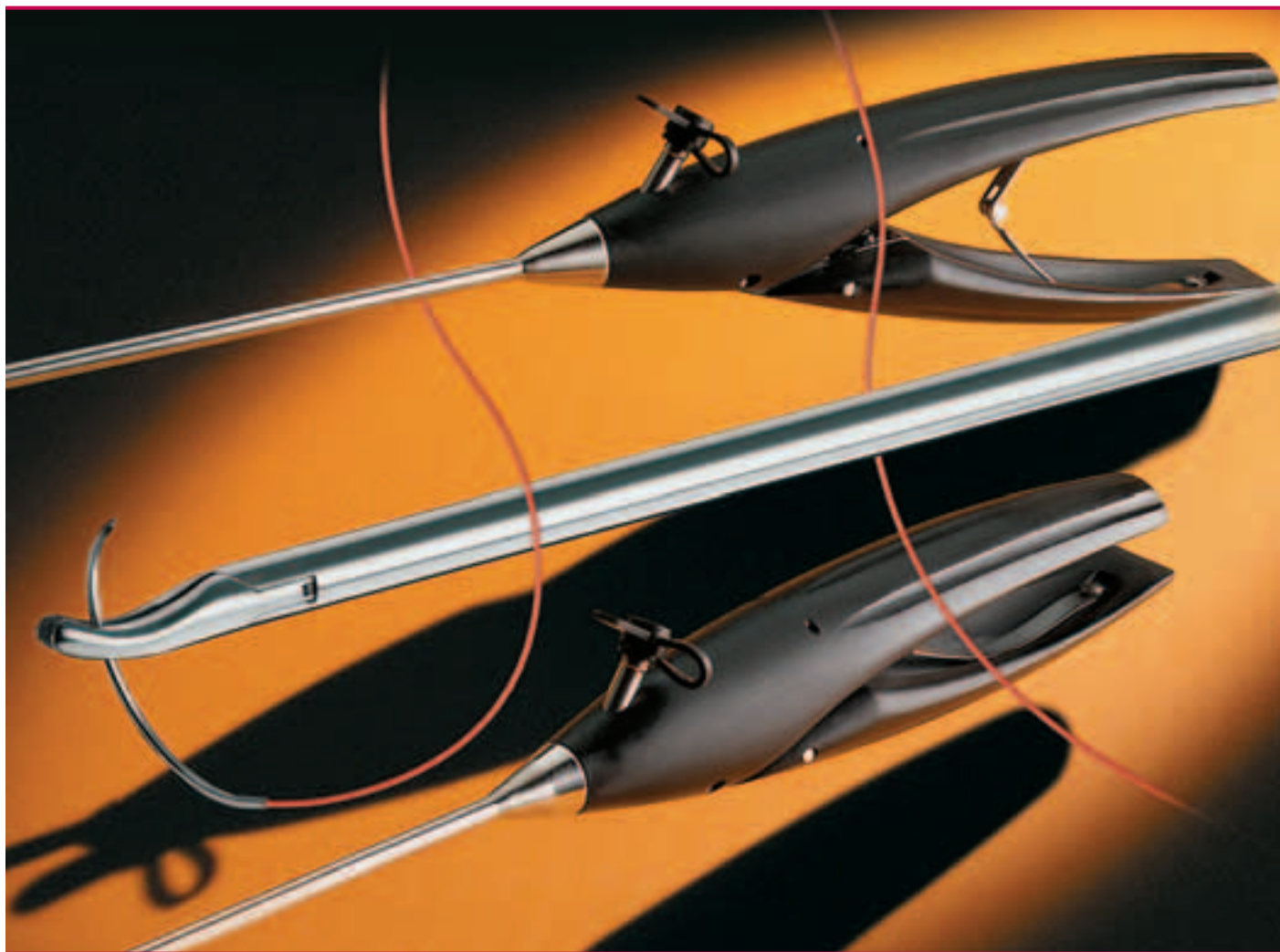

Selected as "Innovation of the Year 2004" by the Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)



Innovation of the Year 2004

The new generation of Aesculap needle holders has been awarded as the Innovation of the Year 2004 by "Society of Laparoendoscopic Surgeons".

Innovation des Jahres 2004

Die neue Generation von Aesculap Nadelhaltern wurde durch die „Society of Laparoendoscopic Surgeons“ mit dem Innovationspreis des Jahres 2004 ausgezeichnet.



With the new needle holders, Aesculap offers a range of instruments specially developed for suturing and knotting. The new axial handle allows the instruments to be rotated very easily. The matching combinations of needle holders enable safe and efficient working.

Mit den neuen Nadelhaltern bietet Aesculap ein speziell zum Nähen und Knoten entwickeltes Instrumentarium an. Durch den neuen axialen Handgriff können die Instrumente sehr einfach rotiert werden. Mit den aufeinander abgestimmten Nadelhalter Kombinationen ist ein sicheres und effizientes Arbeiten möglich.

- Precise grip on curved and straight needles; secure grip on the suture thread.
 - Integrated overload protection allows holding course needles as securely as fine ones.
 - Ergonomic working posture through axial handle design. The axial arrangement allows holding the instrument in any position.
 - Simple lock with just two fixed positions following the push ballpoint principle. The needle can thus be gripped securely with the lock either engaged or released.
 - Easier suturing and knotting through mutually corresponding instrument combinations.
 - Long life span: all DUROGRIP needle holders with tungsten carbide inserts in jaw parts.
-
- Präzises Fassen von gebogenen und geraden Nadeln und sicheres Greifen des Fadens.
 - Durch den eingebauten Überlastungsschutz im Instrument können grobe Nadeln ebenso sicher gehalten werden wie feine.
 - Ergonomische Arbeitsweise durch axialen Handgriff. Durch die axiale Anordnung kann das Instrument in jeder Position gehalten werden.
 - Einfache Sperre mit nur zwei Rastpositionen nach dem Kugelschreiberprinzip. Die Nadel kann somit mit arretierter und gelöster Sperre sicher gefasst werden.
 - Erleichtertes Nähen und Knoten durch miteinander korrespondierende Instrumentenkombinationen.
 - Lange Lebensdauer: alle DUROGRIP Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen in den Maulteilen.



AdTec[®]needle holder
Expertise in Surgery.



Catalog number
Artikelnummer

DUROGRIP
Needle holder straight
Nadelhalter gerade

5 mm/310 mm

5 mm/370 mm



1:1


PL407R

PL404R

DUROGRIP
Needle holder curved left
Nadelhalter links gebogen

5 mm/310 mm

5 mm/370 mm

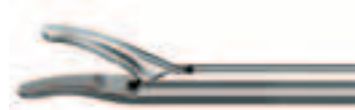

1:1

PL408R

PL405R

DUROGRIP
Needle holder curved right
Nadelhalter rechts gebogen

5 mm/310 mm

5 mm/370 mm



1:1

PL413R

PL415R

DUROGRIP
Assist. needle holder, 2 x 3 teeth
Assist. Nadelhalter, 2 x 3 Zähne

5 mm/310 mm



1:1

PL409R

CROCE/OLMI
DUROGRIP Needle holder fenestrated
DUROGRIP Nadelhalter gefenstert

5 mm/310 mm



1:1

PL410R

CROCE/OLMI
DUROGRIP Needle holder crimped
DUROGRIP Nadelhalter gekröpft

5 mm/310 mm



1:1

PL411R

DUROGRIP
Needle holder curved left
Nadelhalter links gebogen

10 mm/310 mm



1:1

PL412R



AdTec[®]needle holder
Expertise in Surgery.



Catalog number
Artikelnummer

SUPER-righting needle holder
SUPER-righting Nadelhalter

5 mm/310 mm



1:1


PL414R

SUPER-righting needle holder.

Allow automatic upright positioning of the needle at different angles to the instrument shaft.

Selbstaufrechtender Nadelhalter.


Ermöglicht das selbsttätige Aufrichten der Nadel in unterschiedlichen Winkelstellungen zum Instrumentenschaft.

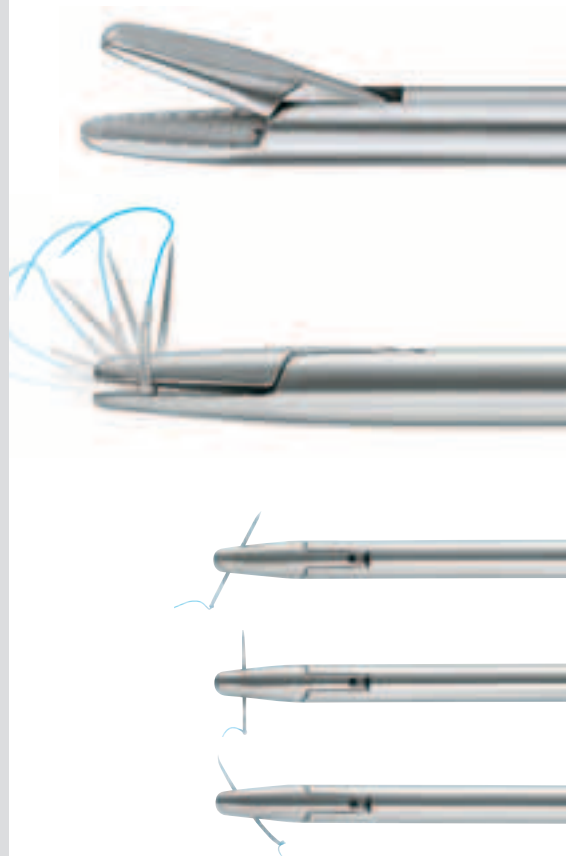

Additional instrument with same handle
Zusätzliches Instrument mit gleichem Handgriff

Anvil Grasper

Anlegezange für Gegendruckplatte
eines Circular-Staplers 10 mm/370 mm

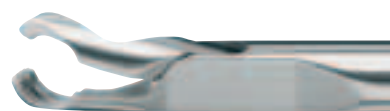

1:1

PL406R



AESCULAP®

Expertise in Surgery.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen

Telefon +49 7461 95-0

Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.